



## SyriPIC®™ / Kanülen

COMPET MEDICAL AG / [www.competmedical.com](http://www.competmedical.com)

### 1. Ein komplettes Sortiment für individuelle Anforderungen

- All unsere Nadeln entsprechen dem neuesten Stand der Injektionstechnik.
- Die Kanülen werden aus nicht rostendem Chrom-Nickel-Stahl gefertigt.
- Das Nadelgehäuse wird aus Polypropylen hergestellt.
- Dieser transparente Kunststoff-Ansatz ist farbcodiert nach ISO 6009.
- Unsere angebotenen Kanülen sind von höchster Qualität und unterliegen einer systematischen Prüfung.
- Erhältlich in den Größen 23G – 29G.
- Fertigung nach ISO 7864.



### 2. Schlifftchnik



Ein Drogenkonsument ist häufig mit der Herausforderung konfrontiert mehrmals in seine Venen zu stechen, bis er eine Lösung injizieren kann. Eine Nadel, die möglichst sanft durch die Haut und sicher in die Vene eindringt ist ein großer Vorteil.

Die Schlifftchnik ist entscheidend für eine Nadel, die auch nach mehrmaligen Einstechversuchen noch einsetzbar ist. SyriPIC®™ Nadeln zeichnen sich durch eine ultrascharfe Lanzettenspitze aus. Die präzise geschliffenen Kanten dringen leicht in das Gewebe ein und gewährleisten eine schmerzarme Punktion. Ein Silikonkappe bewirkt ein sanftes Vordringen der Nadel.



neu      1x      2x      3x      4x

Abb.: Nadel nach mehrmaligem Gebrauch

Unterschiedliche Schlifftchniken beeinträchtigen die Qualität einer Nadel erheblich. Eine qualitative schlechte Nadel unterscheidet sich dadurch, dass sie nach mehreren Versuchen die Nadel in die Haut zu stechen beschädigt, abstumpft und unbrauchbar wird.

#### COMPET MEDICAL AG

Niederlassung BRD: Max-Stromeier-Str. 170, D-78467 Konstanz, E-Mail: [info@competmedical.com](mailto:info@competmedical.com), Tel. +49 7531 361 07 90, Fax +49 7531 361 07 91

Hauptsitz: Kalchthorenstr. 4, CH-8598 Bottighofen, E-Mail: [info@competmedical.com](mailto:info@competmedical.com), Tel. +41 71 680 00 60, Fax +41 71 680 00 64  
[www.competmedical.com](http://www.competmedical.com)



## SyriPIC®™ / Kanülen

### 3. Verpackung einfach und sicher

Die Nadeln sind einzeln steril in einer Blisterpackung (ISO 6009). Lot und Verfalldatum sind deutlich gezeichnet. Der transparente farbcodierte Luer-Hub ermöglicht eine einfache Erkennung der Nadelgröße.




### 4. Schutzkappe



Die stabile Schutzkappe auf der Nadel gewährleistet einen einwandfreien Schutz der Nadel bis zu deren Gebrauch.

### 5. Ultra-dünnwandig für erhöhte Durchflussraten

Ein weiterer Faktor, der die SyriPIC®™ Nadeln kennzeichnet, ist ihre Ultradünnwandigkeit, durch die sich die Durchflussrate der Injektionslösung erhöht. Ultradünnwandnadeln ermöglichen es, eine kleinere Nadelgröße zu wählen.

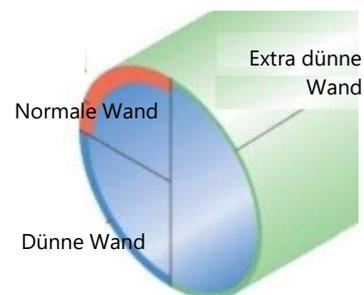

#### COMPET MEDICAL AG

Niederlassung BRD: Max-Stromeyer-Str. 170, D-78467 Konstanz, E-Mail: info@competmedical.com, Tel. +49 7531 361 07 90, Fax +49 7531 361 07 91


Hauptsitz: Kalchthorenstr. 4, CH-8598 Bottighofen, E-Mail: info@competmedical.com, Tel. +41 71 680 00 60, Fax +41 71 680 00 64  
www.competmedical.com



## SyriPIC®™ / Kanülen

COMPET MEDICAL AG / www.competmedical.com

### 6. COMPET MEDICAL AGs Innovation SyriFILT®™ PIC

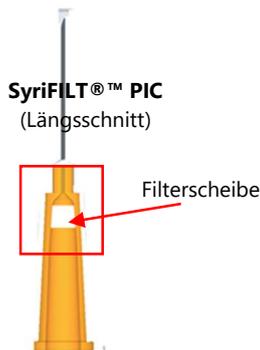

SyriFILT®™ PIC  
(Längsschnitt)



SyriFILT®™ PIC  
Kanüle mit integrierter Filterscheibe  
(Luer-Slip und Luer-Lock)

#### SyriFILT®™ PIC

- Die Filterscheibe wird in den Hub der Einmalkanüle eingesetzt. Die gleiche Filterscheibe ist im SyriFILT®™ STANDARD eingebaut.
- Der Filter eliminiert maximal Unreinheiten einer Lösung vor der Injektion.
- In den Standardgrößen 23G - 29G erhältlich.
- Die Verwendung von Spritzen mit Luer-Lock Anschluss gewährt einen sichereren Halt des SyriFILT®™ PIC.

#### Besonderer Nutzen des SyriFILT®™ PIC

- Einfachere Handhabung: Mit nur einem Handgriff lassen sich Filter und Kanüle auf die Spritze aufstecken.  
Vorgehensweise:
  1. Lösung aufziehen
  2. Nadel aufstecken
  3. Lösung injizieren
  4. Spritzbesteck sicher entsorgen
- Somit entfällt der Handlungsschritt Aspiration durch den Filter. Die Handhabung des SyriFILT®™ PIC ist einfacher und anwenderorientierter.
- Der Filter verstopft nach einmaligem Gebrauch und kann nicht wiederverwendet werden.
- Dieser Filtertyp produziert weniger Abfall (keine zusätzliche Verpackung für den Filter).

#### COMPET MEDICAL AG

Niederlassung BRD: Max-Stromeyer-Str. 170, D-78467 Konstanz, E-Mail: info@competmedical.com, Tel. +49 7531 361 07 90,  
Fax +49 7531 361 07 91

Hauptsitz: Kalchthorenstr. 4, CH-8598 Bottighofen, E-Mail: info@competmedical.com, Tel. +41 71 680 00 60, Fax +41 71 680 00 64  
www.competmedical.com



## SyriPIC®™ / Kanülen

### 7. SyriPIC®™ SAFE

#### SyriPIC™ SAFE / Sicherheitskanüle:

- Mechanische Schutzhülle für die gebrauchte Kanüle.
- Ausführung passt auf Luer-Slip und Luer-Lock.

#### Besonderer Nutzen der SyriPIC®™ SAFE

(Sicherheitskanüle)

- Die Aktivierung nach der Injektion reduziert das Risiko mit der benutzten Nadel in Kontakt zu kommen
- Reduktion des Risikos von Nadelstichverletzungen
- Bleibt sicher auch nach der Entsorgung
- Einfach in der Anwendung
- Diese Kanüle kann auch als SyriFILT®™ PIC SAFE bestellt werden. Kanüle mit integrierter Filterscheibe (Vgl. Abschnitt 9).



**SyriPIC®™ SAFE**  
auf Spritze aufgesetzt vor der Injektion



Die Schutzhülle wird mechanisch aufgedreht nach der Injektion



**SyriPIC®™ SAFE**  
Ansicht Kanüle in der Schutzhülle

#### COMPET MEDICAL AG

Niederlassung BRD: Max-Stromeyer-Str. 170, D-78467 Konstanz, E-Mail: [info@competmedical.com](mailto:info@competmedical.com), Tel. +49 7531 361 07 90, Fax +49 7531 361 07 91

Hauptsitz: Kalchthorenstr. 4, CH-8598 Bottighofen, E-Mail: [info@competmedical.com](mailto:info@competmedical.com), Tel. +41 71 680 00 60, Fax +41 71 680 00 64 [www.competmedical.com](http://www.competmedical.com)



## SyriPIC®™ / Kanülen

www.competmedical.com

### 8. EasyPoint® / Sicherheitskanüle



#### EasyPoint®

Gebrauchte Nadel sicher in der Schutzkappe, nach der Injektion

#### EasyPoint® / Sicherheitskanülen

- Automatischer Nadelrückzug, den man vor oder nach der Injektion aktivieren kann.
- Ausführung passt auf Luer-Slip und Luer-Lock.

#### Besonderer Nutzen der EasyPoint® / Sicherheitskanülen

- Die Aktivierung vor der Injektion reduziert das Risiko mit der benutzten Nadel in Kontakt zu kommen.
- Wiederverschließen nach Gebrauch ist unnötig.
- Reduktion des Risikos von Nadelstichverletzungen.
- Bleibt sicher auch nach der Entsorgung.
- Einfach in der Anwendung.
- Video [www.competmedical.com](http://www.competmedical.com)

#### COMPET MEDICAL AG

Niederlassung BRD: Max-Stromeyer-Str. 170, D-78467 Konstanz, E-Mail: [info@competmedical.com](mailto:info@competmedical.com), Tel. +49 7531 361 07 90, Fax +49 7531 361 07 91

Hauptsitz: Kalchthorenstr. 4, CH-8598 Bottighofen, E-Mail: [info@competmedical.com](mailto:info@competmedical.com), Tel. +41 71 680 00 60, Fax +41 71 680 00 64 [www.competmedical.com](http://www.competmedical.com)



## SyriPIC®™ / Kanülen


### 9. SyriFILT®™ PIC SAFE (Filterscheibe)

#### SyriFILT™ PIC SAFE / Sicherheitskanülen:

- Mechanische Schutzhülle für die gebrauchte Kanüle.
- Ausführung passt auf Luer-Slip und Luer-Lock.
- Mechanische Sicherheitskanüle mit integrierter Filterscheibe, (Luer-Slip und Luer-Lock).
- Die gleiche Filterscheibe ist im SyriFILT®™ STANDARD eingebaut.
- Der Filter eliminiert maximal Unreinheiten einer Lösung vor der Injektion.
- In den Standardgrößen 23G - 29G auf Bestellung erhältlich.
- Die Verwendung von Spritzen mit Luer-Lock Anschluss gewährt einen sichereren Halt des SyriFILT®™ PIC.



**SyriFILT®™ PIC SAFE**  
auf Spritze aufgesetzt,  
vor der Injektion  
mit integrierter Filterscheibe  
Luer-Slip und Luer-Lock

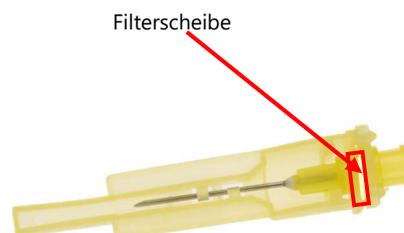

#### Besonderer Nutzen der SyriFILT®™ PIC SAFE (Sicherheitskanüle):

- Die Aktivierung nach der Injektion reduziert das Risiko mit der benutzten Nadel in Kontakt zu kommen.
- Reduktion des Risikos von Nadelstichverletzungen.
- Bleibt sicher auch nach der Entsorgung.
- Einfach in der Anwendung. (vergl. SyriFILT®™ PIC)